


LM SlimLift™

Leve lussatrici progettate per zone estremamente strette

Gli strumenti LM-SlimLift™ sono progettati per accedere a punti difficilmente raggiungibili con le tradizionali leve lussatrici. Permettono di eseguire l'estrazione del dente in modo ancora più atraumatico grazie alle punte estremamente sottili adatte a spazi molto stretti, consentendo una guarigione rapida. La sottile punta viene introdotta nello spazio parodontale e fatta progredire lentamente verso l'apice della radice mentre lo strumento viene fatto ruotare delicatamente attorno al dente in senso orario e antiorario.



LM-SlimLift™ non è adatto all'uso come leva per estrazione forzata.

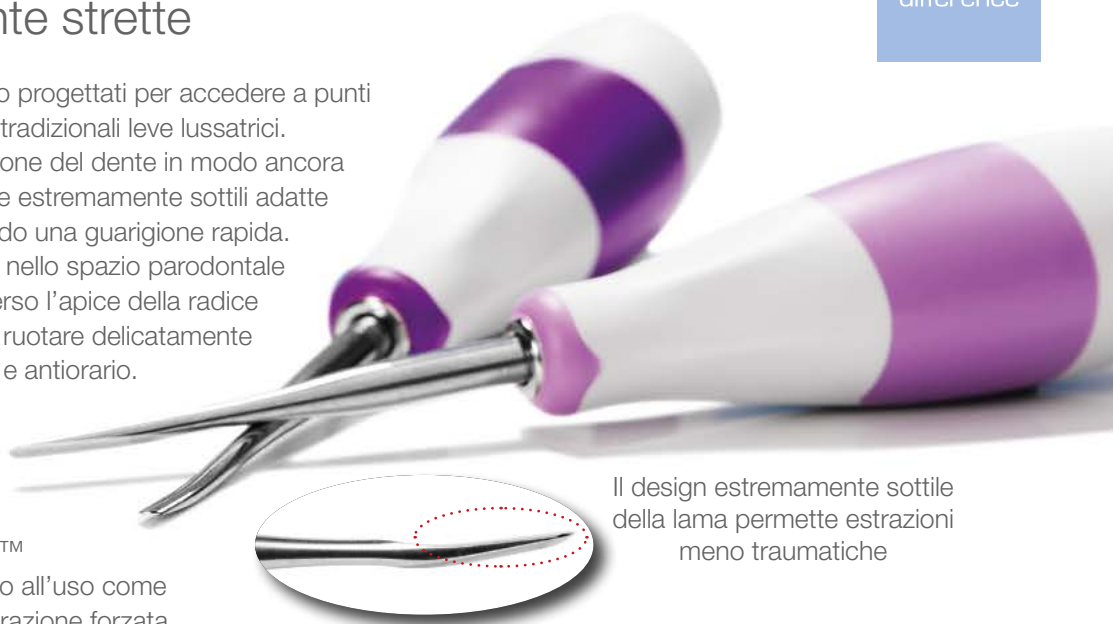

Il design estremamente sottile della lama permette estrazioni meno traumatiche



Scopri di più su www.lm-dental.com

Angolazioni e dimensioni

Lama dritta

LM-SlimLift™ S3
LM 812630



3 mm

LM-SlimLift™ S4
LM 812640



4 mm

LM-SlimLift™ S5
LM 812650



5 mm

Lama curva

LM-SlimLift™ C3
LM 812830



3 mm

LM-SlimLift™ C4
LM 812840



4 mm

LM-SlimLift™ C5
LM 812850



5 mm

Strumenti LM-SlimLift™ a punta fine - una soluzione realmente atraumatica

MD, DDS, D.Med.Sc, Oral Surgeon
Peter Jungell, Helsinki, Finland



“Attualmente utilizzo gli strumenti LM-SlimLift™ per eseguire quasi tutte le estrazioni. Utilizzo anche i miei strumenti di lussazione preferiti più vecchi, mentre l'uso di quelli tradizionali è ora meno frequente.

Lo strumento di lussazione a punta fine LM™ può essere introdotto anche in spazi parodontali particolarmente stretti. Quando si usano strumenti larghi, la forza di lussazione si distribuisce su un'area più ampia sui lati e più in profondità verso l'apice delle radici, in modo da ridurre al minimo il rischio di fratturare le radici più fragili. Nella maggior parte dei casi è possibile eseguire l'estrazione utilizzando gli strumenti di lussazione senza dover ricorrere ad altre procedure operatorie.

Il design e il materiale dello strumento LM-SlimLift™ consentono di ottenere una presa eccellente. Di primo

acchito, l'impugnatura può sembrare troppo grande, in realtà ho notato che durante l'uso clinico si adatta perfettamente alla mano. Lo strumento può essere impugnato sia con tutto il palmo della mano o solo con le dita. L'ampia gamma di misure disponibili facilita la scelta dello strumento più adatto per qualsiasi necessità clinica. Le lame ampie costituiscono la soluzione ideale per l'estrazione dei molari inferiori mentre le punte fini sono perfette, ad esempio, per l'estrazione delle radici più strette dei denti superiori.

Posso consigliare gli strumenti LM-SlimLift™ a tutti i dentisti: sarebbe opportuno abbandonare totalmente strumenti vecchi e poco performanti. Troppo spesso si sente di casi di estrazione nei quali la gestione dell'apice ha richiesto quasi due ore di trattamento.”