

Specchietto dentale non sterile, riutilizzabile, costituito da una cassa in acciaio inossidabile al cui interno è collocata una cornice in silicone sulla quale viene appoggiato un disco di vetro, precedentemente trattato con metallizzazione diversa a seconda dei modelli. Sulla cassa è saldata una piccola asta con filettatura che ne consente l'avvitamento a un manico. I vari modelli si distinguono a seconda delle dimensioni del disco e del tipo di metallizzazione:
 > piano e concavo rivestimento alluminio 99,995% + vernice epossidica
 > rodio e rodio doppio rivestimento rodio 70% e nichel 30%
 Sterilizzare prima dell'uso.


Confezione: scatola contenente 12 specchietti (6 specchietti per il modello doppio)

Tipologia: piano, concavo, rodio, rodio doppio

Misure: 3 (Ø 20 mm) - 4 (Ø 22 mm) - 5 (Ø 24 mm) - 6 (Ø 26 mm) - vedere tabella

Dispositivo Medico di Classe I

Codice	Tipologia	Misura	Confezionamento
10043169	CONCAVO	4 (Ø 22 mm)	12
10043170	CONCAVO	5 (Ø 24 mm)	12
10043171	RODIO DOPPIO	5 (Ø 24 mm)	6
10043167	PIANO	4 (Ø 22 mm)	12
10043168	PIANO	5 (Ø 24 mm)	12
10043172	RODIO	3 (Ø 20 mm)	12
10043173	RODIO	4 (Ø 22 mm)	12
10043174	RODIO	5 (Ø 24 mm)	12
10043175	RODIO	6 (Ø 26 mm)	12

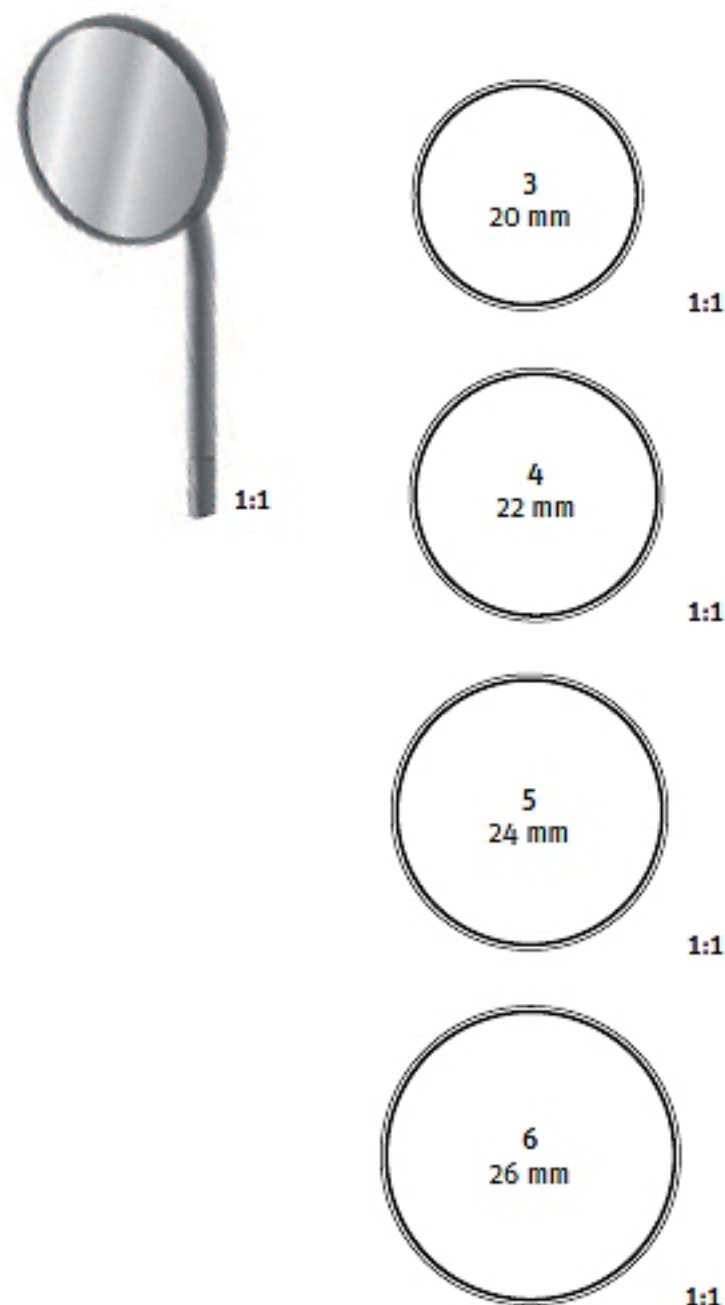

SPECCHIETTI DENTALI FILETTATURA EUROPEA