

Cosa dicono i vostri colleghi professionisti di eZr™...

“Le zone rifinite e lucidate con i gommini diamantati eZr™ hanno un aspetto liscio come il vetro quando le esamo con le mie lenti 4.5x.”

Spencer Bloom, DDS
Chicago, USA

“Io uso il sistema eZr™ su tutte le corone in zirconio ed e-max® †. Questo prodotto è stato fantastico nella lucidatura della zirconia... decisamente migliore di tante altre marche!”

Phillip Howard, DDS
Seattle, USA

“Il sistema eZr™ è l'unico sistema lucidante in grado di lucidare veramente la zirconia. La ricerca ci dice che la zirconia non è troppo abrasiva per la dentatura opposta, purchè sia lucidato a specchio. Con tutti gli altri kit, anche dopo la levigatura, sono ancora visibili tracce di fresatura. Il sistema eZr™ è l'unico sistema che abbia provato che rende la zirconia veramente liscio!”

Todd Brower, DDS
Holland, USA

† Non è un prodotto o marchio commerciale di Garrison Dental Solutions, LLC.

Informazioni per ordinare

Codice	Descrizione	Utilizzo	Prezzo
FPZK01-X	Kit sistema completo, 2 gommini diamantati abrasivi e 6 gommini diamantati lucidanti	Rifinitura, levigatura, prelucidatura e brillantatura	€ 159,00
FPZC030	Rifinitura con disco blu a grana grossa, confezione da 5	Rifinitura	€ 125,00
FPZC010	Rifinitura, lenticolare blu a grana grossa, confezione da 5	Rifinitura	€ 95,00
FPZM010	Lucidante a punta fine grana media verde, confezione da 5	Levigatura e prelucidatura	€ 39,00
FPZM020	Lucidante a punta grossa grana media verde, confezione da 5	Levigatura e prelucidatura	€ 59,00
FPZM030	Lucidante a disco grana media verde, confezione da 5	Levigatura e prelucidatura	€ 59,00
FPZM040	Lucidante a coppetta grana media verde, confezione da 5	Levigatura e prelucidatura	€ 59,00
FPZF010	Lucidante a punta fine grana fine, arancio, confezione da 5	Brillantatura	€ 39,00
FPZF020	Lucidante a punta grande grana fine arancio, confezione da 5	Brillantatura	€ 59,00
FPZF030	Lucidante a disco grana fine arancio, confezione da 5	Brillantatura	€ 59,00
FPZF040	Lucidante a coppetta grana fine arancio, confezione da 5	Brillantatura	€ 59,00

eZr™

Intra-oral Adjustment/Polishing for Zirconia and Lithium Disilicate

Indiscutibilmente liscio



Garrison

Dental Solutions

Carlstrasse 50
D-52531 Uebach-Palenberg

Tel. 800-986225 • Fax 02-32066761
info@garrisondental.net
www.garrisondental.com

Garrison

Dental Solutions

IN eZr 0115

Putting ideas into practice.

Con eZrTM lucidatura più facile !

La corretta lavorazione della zirconia è stato un tema controverso per molto tempo, a causa del rischio di microfratturazione. Ora è possibile la finitura con strumenti appropriati, per ottenere una stabilità a lungo termine del restauro.


Il Sistema di Lucidatura eZrTM mette a disposizione una soluzione di lavorazione che non solo produce una brillantatura, ma aumenta anche la stabilità fisica grazie alla lucidatura. Ora è possibile ottenere superfici in zirconia stabili levigate a specchio. I lucidanti hanno una lunga durata e, in combinazione con un'elevata percentuale di rimozione del materiale, permettono di utilizzare un sistema di lavorazione rapido ed economico per ottenere una finitura lucida in pochi secondi, senza paste lucidanti.

- Consente una procedura facile e sicura per zirconia e disilicato di litio.
- L'esclusivo gommino diamantato lucidante riduce la possibilità di scheggiature e microfratture.
- Fornisce una superficie occlusale liscia e lucidata come mai prima, eliminando l'abrasività nei confronti della dentatura opposta.
- Evita il surriscaldamento che potrebbe causare una rottura prematura.
- Elimina la necessità di paste lucidanti, riducendo i costi generali della procedura.

eZrTM è un sistema di lucidatura diamantato a tre fasi per la lavorazione della zirconia e disilicato di litio. I gommini abrasivi e quelli lucidanti sono ideali per registrazione e correzione di restauri alla poltrona, quali inlay, onlay, faccette e corone.



1 Iniziare con una rifinitura e contornatura approssimative mediante mole a grana grossa blu. Usare la punta lenticolare con estremità piatta per le superfici occlusali/labiali/linguali/buccali e il disco per le superfici interprossimali.

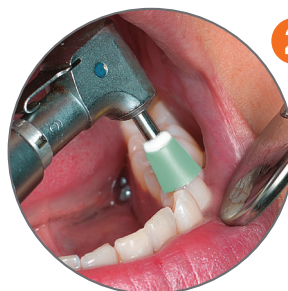

2 Usare i lucidanti a grana media verdi per levigatura e prelucidatura. Usare la punta per i solchi occlusali, la coppetta per la superfici labiali/linguali/buccali e il disco per le superfici interprossimali.



3 Usare i lucidanti a grana fine arancio per brillantatura. Usare la punta per i solchi occlusali, la coppetta per la superfici labiali/linguali/buccali e il disco per le superfici interprossimali.



FPZK01 - Kit eZrTM

€ 159,00

I gommini diamantati lucidanti Garrison All-New eZrTM

permettono di rifinire e lucidare, in modo facile e sicuro, la zirconia e il disilicato di litio, riducendo la possibilità di scheggiature e microfratture.

