

**3M** Science.  
Applied to Life.™

3M™ RelyX™ Universal  
cemento composito

# Addio alla complessità.



# Due prodotti per tutte le indicazioni.

**3M™ RelyX™ Universal cemento composito** è sia un cemento autoadesivo sia un cemento adesivo da utilizzare in abbinamento a **3M™ Scotchbond™ Universal Plus adesivo**.

Insieme permettono di eliminare i problemi e la confusione dovuti alla necessità di utilizzare più cementi compositi, primer e adesivi, **semplificando il flusso di lavoro nel restauro diretto e indiretto**. Riduce lo stock e la necessità di reintegrarlo, con un risparmio di spazio, tempo e denaro.

## Semplici, ma estremamente efficaci.

- **Due componenti per quasi tutte le indicazioni della cementazione diretta e indiretta**
- **Eccellente autoadesione di RelyX Universal cemento composito**
- **Scotchbond Universal Plus adesivo aumenta ulteriormente la forza di adesione a tutti i substrati**
- **Siringa automix 3M brevettata**
- **Facile rimozione del materiale in eccesso**
- **Estetica elevata**



## Siringa innovativa.

Il design brevettato 3M porta le applicazioni in cemento automix ad un livello superiore. Sviluppata tenendo conto delle vostre esigenze, per facilitare l'erogazione, la pulizia e la conservazione. La siringa da 3,4g, ridotta nelle dimensioni e a basso spreco, eroga una quantità di materiale sufficiente per circa 15 applicazioni.

## Facile rimozione del materiale in eccesso.

Efficiente fino all'ultimo passaggio. La sua composizione chimica brevettata fa sì che il materiale in eccesso fuoriuscito dal restauro rimanga sui margini e possa essere rimosso facilmente dopo la polimerizzazione con tecnica "tack cure".



Cementazione autoadesiva di un ponte in 3M™ Lava™ Esthetic zirconia estetica fluorescente full-contour. Immagine su gentile concessione del Dott. Jan Gueth, Germania

Meno stock, maggiore risparmio

**95%**

dei dentisti ha dichiarato che il carattere universale di RelyX Universal cemento composito permette di **ridurre lo stock e di risparmiare sui costi**.

Maggiore semplicità per il personale operativo

**97%**

dei dentisti ha dichiarato che l'uso di un solo cemento composito universale al posto di più prodotti è **più semplice per il personale operativo**.

“Eccellente sistema di erogazione, igienico e con minimo spreco di materiale.”

M.W., Gran Bretagna\*\*\*

**80%**  
di riduzione dello spreco di cemento\* con il Micro Mixing Tip

Più igienica.\*\* Autosigillante, per conservarla senza il puntale miscelatore usato.

Elongation tip lungo e sottile per agevolare l'applicazione nel canale radicolare



“Buona lavorabilità, pochi componenti e, quindi, meno possibilità di errore.”

J. L., Germania\*\*\*

Forma più ergonomica con il **50%** di plastica in meno\*

## Un partner solido per i restauri adesivi.


3M™ Scotchbond™ Universal Plus adesivo è il primo adesivo universale monocomponente radiopaco di 3M per tutte le indicazioni della cementazione diretta e indiretta. Inoltre è un sistema completamente integrato: l'adesivo viene polimerizzato dal cemento, pertanto non occorre fotopolimerizzare.

Scotchbond Universal Plus adesivo funge da primer universale per tutti i materiali, compresa la ceramica vetrosa, e potenzia ulteriormente l'eccellente forza di adesione del cemento, ad es. all'ossido di zirconio.




## Eccellente autoadesione per la massima efficienza.

Grazie alla sua eccellente forza di adesione alla dentina, RelyX Universal cemento composito può essere utilizzato in modo affidabile nella maggior parte dei casi, senza necessità di applicare un adesivo o un primer aggiuntivo. Per fotopolimerizzazione o autopolimerizzazione.

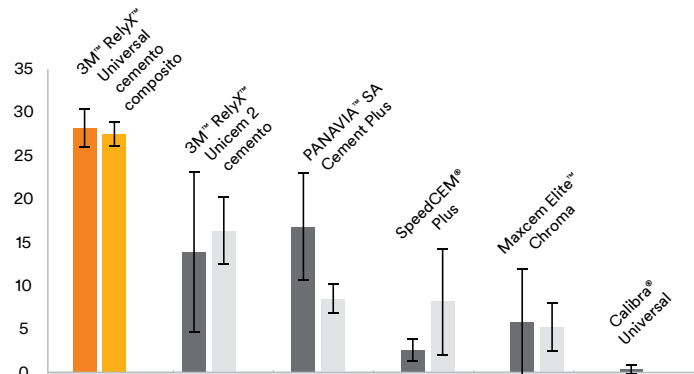

Resistenza al taglio dell'adesione (MPa) alla dentina dopo invecchiamento artificiale  
R. Afutu, M. Abreu, G. Kugel, Tufts University, J. Dent. Res. Vol. 98A, n. 3629, 2019

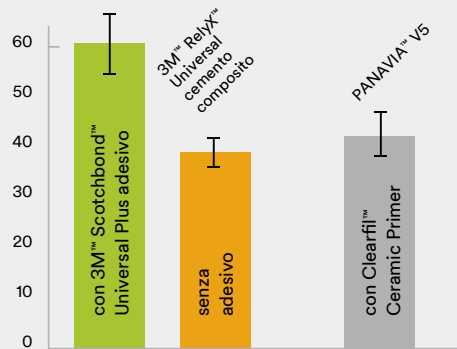


Resistenza al taglio dell'adesione (MPa) all'ossido di zirconio in seguito ad autopolimerizzazione.  
C. E. Sabrosa et al., J. Dent. Res. Vol. 99A, n. 1838, 2020



## Bassissima sensibilità postoperatoria

**99%** dei dentisti ha riferito che RelyX Universal cemento composito mostra una **bassissima sensibilità post-operatoria\*\*\***

**Estetica elevata** con quattro colori stabili e fluorescenti

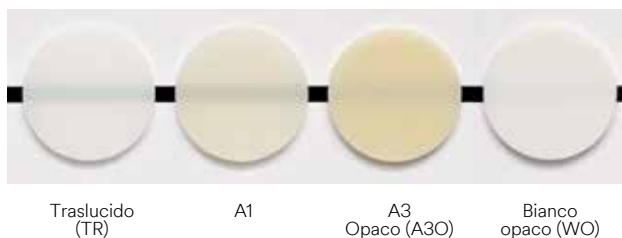

## Informazioni per l'ordine

### 3M™ RelyX™ Universal cemento composito

#### Cod. Informazioni sul prodotto

##### Intro kit

**56968** 4 siringhe di 3M™ RelyX™ Universal cemento composito nei colori TR, A1, A3O, WO (da 3,4 g ciascuna), 60 3M™ RelyX™ Universal Micro Mixing Tips, 20 Elongation tips, 1 flacone di 3M™ Scotchbond™ Universal Plus adesivo (da 5 ml), 1 3M™ Scotchbond™ Universal mordenzante (da 3 ml), 25 puntali per mordenzante blu, 50 microspazzolini arancioni, guide step by step

##### Trial kit

Ogni trial kit contiene: 1 siringa di 3M™ RelyX™ Universal cemento composito (da 3,4 g), 15 3M™ RelyX™ Universal Micro Mixing Tips, 5 Elongation tips, 1 flacone di 3M™ Scotchbond™ Universal Plus adesivo (da 1,5 ml), 1 3M™ Scotchbond™ Universal mordenzante (da 3 ml), 25 puntali per mordenzante blu, 50 microspazzolini arancioni, guide step by step

**56969 Colore TR** **56970 Colore A1**

##### Ricambio

Ogni ricambio contiene: 1 siringa di 3M™ RelyX™ Universal cemento composito (da 3,4 g), 15 3M™ RelyX™ Universal Micro Mixing tips, 5 Elongation tips

**56971 Colore TR** **56973 Colore A3O**

**56972 Colore A1** **56974 Colore WO**

##### Value pack

Ogni value pack contiene: 3 siringhe di 3M™ RelyX™ Universal cemento composito (da 3,4 g ciascuna), 45 3M™ RelyX™ Universal Micro Mixing tips, 15 Elongation tips

**56977 Colore TR** **56978 Colore A1**

##### Puntali miscelatori

**56975** 30 3M™ RelyX™ Universal Micro Mixing Tips

**56976** 15 3M™ RelyX™ Universal Micro Mixing Tips e 15 Elongation Tips

### 3M™ Scotchbond™ Universal Plus adesivo

#### Flacone

**41293** **Intro kit:** 1 flacone di 3M™ Scotchbond™ Universal Plus adesivo (da 5 ml), 50 spazzolini monouso, 1 3M™ Scotchbond™ Universal mordenzante (da 3ml), 25 puntali applicatori

**Ricambio:** flacone di 3M™ Scotchbond™ Universal Plus adesivo (da 5 ml)

**41294 1 flacone da 5 ml** **41295 3 flaconi da 5 ml**

#### Confezione monodose

1 confezione monodose di 3M™ Scotchbond™ Universal Plus adesivo L-Pop, 1 3M™ Scotchbond™ Universal mordenzante (da 3ml), 25 puntali applicatori

**41297** **Intro kit: 50 L-Pop** **41299 200 L-Pop**

**41298 100 L-Pop** **41304 400 L-Pop**

### 3M™ Scotchbond™ Universal gel mordenzante

**41263** 2 siringhe di 3M™ Scotchbond™ Universal Etching Gel (da 3ml ciascuna), 50 puntali applicatori



3M™ RelyX™ Universal cemento composito, intro kit (56968)



3M™ RelyX™ Universal cemento composito, trial kit TR (56969)



3M™ RelyX™ Universal cemento composito, ricambio TR (56971)



3M™ Scotchbond™ Universal Plus adesivo, ricambio (41294)



**3M™ Scotchbond™ Universal Plus adesivo, confezione monodose:**

Per un'igiene più efficiente. Riduce il rischio di contaminazione crociata.

3M™ Scotchbond™ Universal Plus adesivo, confezione monodose, 100 L-Pop (41298)



[www.3mitalia.it](http://www.3mitalia.it)

**3M Oral Care · 3M Italia srl**  
Via N. Bobbio, 21 · 20096 Pioltello (MI)  
Tel. 027035 3537  
3mitalyOralCare@mmm.com  
[www.3mitalia.it](http://www.3mitalia.it)

I prodotti delle linee RelyX™, Lava™ e Scotchbond™ sono dispositivi medici marcati CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso. Materiale tecnico-scientifico riservato al personale sanitario. 3M, Lava, RelyX e Scotchbond sono marchi di fabbrica di 3M o 3M Deutschland GmbH. Utilizzati su licenza in Canada. Tutti gli altri marchi di fabbrica sono di proprietà di altre società. © 3M 2020. Tutti i diritti riservati.