


# LA SOLUZIONE BIOATTIVA PER L'IPERSENSIBILITÀ

Novità


## Predicta™ desensitizer BIOACTIVE

Il nuovo Predicta™ Bioactive Desensitizer cambia la tecnica odontoiatrica per trattare l'ipersensibilità. Grazie alla formulazione chimica di nuova generazione, il materiale è altamente biocompatibile e al tempo stesso bioattivo. Predicta Desensitizer rilascia infatti ioni calcio e fosfato nel sito di trattamento, stimolando la rapida formazione di cristalli di idrossiapatite nelle microfessure dello smalto dentale, sulla superficie della dentina trattata e nei tubuli dentinali. L'efficacia è dimostrata da un rapido e potente sollievo dal dolore.

- Rapido sollievo dal dolore grazie all'avanzata formulazione chimica
- La formulazione in gel, che non necessita di miscelazione, assicura un'applicazione controllata, precisa e semplice
- Non influenza la forza adesiva di agenti adesivi o compositi

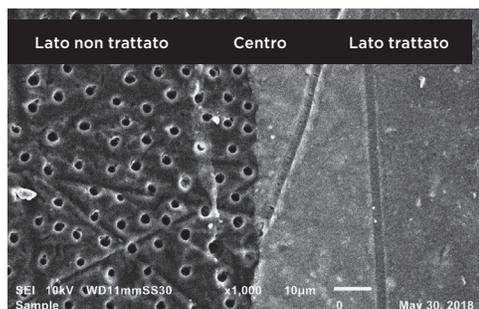

I tubuli dentinali sul lato non trattato sono stati coperti con un denso strato di Predicta™ Bioactive Desensitizer. (Immagine per gentile concessione del Dr. Alireza Sadr, DDS, PhD, University of Washington School of Dentistry (Scuola di Odontoiatria dell'Università di Washington))

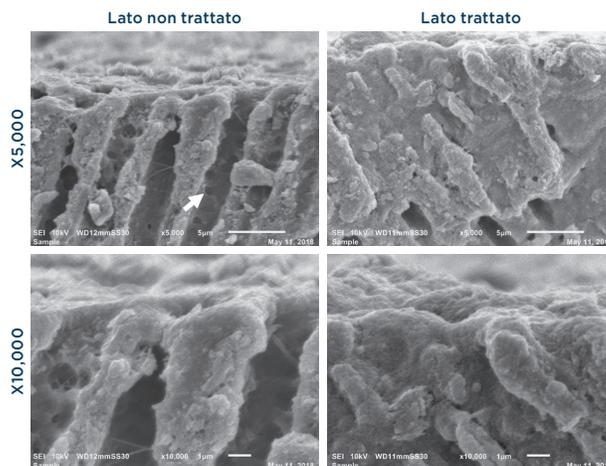

Immagini in sezione al SEM. Si noti la pervietà dei tubuli dentinali e gli orifizi dei tubuli laterali aperti (freccia) che sono stati ben sigillati sul lato trattato. (Immagine per gentile concessione del Dr. Alireza Sadr, DDS, PhD, University of Washington School of Dentistry (Scuola di Odontoiatria dell'Università di Washington))


MADE IN  
USA

parkell®

**Predicta Bioactive Desensitizer** è formulato per trattare la sensibilità associata a

- dentina esposta
- trattamenti di sbiancamento dentale
- scaling o levigatura radicolare
- ipersensibilità dovuta a recessione gengivale

Il pre-trattamento con Predicta Desensitizer Gel non influenza negativamente la forza adesiva dei comuni agenti adesivi "self-etch" o "total-etch" o dei compositi applicati sulla dentina. Gli odontoiatri sono quindi liberi di usare Predicta Bioactive Desensitizer Gel per trattare l'ipersensibilità dentale senza dover preoccuparsi di ripercussioni negative sulla forza adesiva degli agenti adesivi "self-etch" o dei compositi

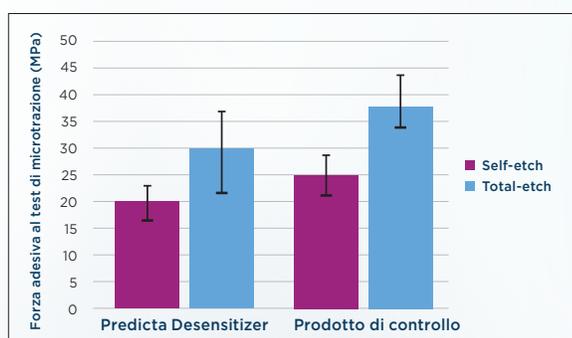

Valore medio espresso in MPa della forza adesiva al test di microtrazione con un agente adesivo universale. Dr. Alireza Sadr, DDS, PhD, University of Washington School of Dentistry (Scuola di Odontoiatria dell'Università di Washington)

Predicta Desensitizer è un gel estremamente facile da usare. A differenza di altri normali desensibilizzanti, non richiede alcuna miscelazione né altre operazioni prima dell'uso. È confezionato in pratiche siringhe e si applica in modo efficiente e preciso sulle aree da trattare utilizzando il semplice pennellino applicatore.

#### PRODOTTI DISPONIBILI

SKU#	DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
S625	Predicta™ Bioactive Desensitizer Kit 3 siringhe da 3 ml, 30 puntali e 50 pennellini
S626	Predicta™ Bioactive Desensitizer Single Syringe 1 siringa da 3 ml, 10 puntali e 15 pennellini

#### ACCESSORI DISPONIBILI

SKU#	DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
S383	Confezione ricambi puntali di applicazione - (30 puntali)
S379	Confezione ricambi applicatori di precisione - 200 pennellini



Per maggiori informazioni o per ordini contattare [pmattiucci@parkell.com](mailto:pmattiucci@parkell.com), tel. +46 708 593 481 oppure visitare il sito [www.parkell.com](http://www.parkell.com).

**parkell®**