

L'ULTIMA INNOVAZIONE
NEL CAMPO DEI MATERIALI
BIOATTIVI
PER RESTAURI BULK-FILL

Novità

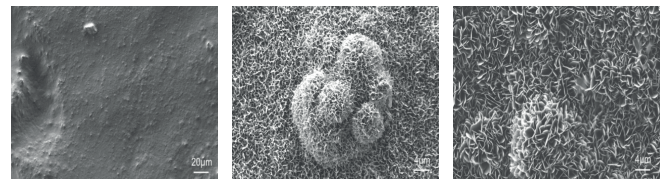

Predicta™ bulk
BIOACTIVE

- Stimola la formazione di apatite minerale: il materiale rilascia componenti minerali (calcio, fosfato e fluoruro) che stimolano la formazione di uno strato protettivo di apatite minerale; è il requisito che qualifica i materiali bioattivi.
- La profondità illimitata di indurimento assicura la polimerizzazione delle parti più profonde del restauro.
- Viscosità tissotropica ideale per una migliore adattabilità alla cavità. Variante a bassa viscosità (LV) disponibile per gli operatori che preferiscono un materiale "bulk-fill" estremamente flowable.
- Materiale nanoriempito per un'elevata durata e una lucidabilità ottimizzata, garanzia di risultati estetici naturali.
- Versatilità clinica: indicato per restauri di classe I, II, III, IV e V. Ideale per la tecnica del bulk filling.
- Semplice e rapido da usare: disponibile in siringa automiscelante (siringa da 5 ml).
- Altamente radiopaco: il materiale è facilmente rilevabile ai raggi x.



Formazione di apatite minerale

Analisi al SEM di una superficie restaurata con composito Predicta™ dopo 28 giorni in SBF (Simulated Body Fluid)



Sinistra: Prodotto di riferimento di Predicta, senza SBF. Centro: Predicta, 7 giorni in SBF. Destra: Predicta, 28 giorni in SBF.

Predicta™ Bioactive Bulk è uno dei più recenti ritrovati tra i nuovi materiali da restauro all'avanguardia firmati da Parkell. È una resina composita, bulk-fill, a polimerizzazione duale, in grado di rilasciare ioni calcio, fosfato e fluoruro per stimolare la formazione di apatite minerale e la remineralizzazione dell'interfaccia composito-dente. Predicta Bioactive Bulk offre una combinazione esclusiva di proprietà fisiche e chimiche. È dimensionalmente stabile, presenta una straordinaria resistenza, una lavorabilità efficiente in termini di tempo e caratteristiche estetiche simili a quelle dei denti naturali. Inoltre, a differenza di altri materiali bioattivi, Predicta Bioactive Bulk è altamente radiopaco, quindi facilmente rilevabile ai raggi x.

PRODOTTI DISPONIBILI

SKU#	DESCRIZIONE DEL PRODOTTO	SHADE
S615	Predicta™ Bioactive pasta bulk-fill	A1/B1
S616	Predicta™ Bioactive Bulk-Fill Paste	A2/B2
S610	Predicta™ Bioactive Bulk-Fill (LV) Paste	A1/B1
S611	Predicta™ Bioactive Bulk-Fill (LV) Paste	A2/B2

ACCESSORI DISPONIBILI

SKU#	DESCRIZIONE DEL PRODOTTO
S620	Pistola per applicazione da 5 ml
S621	Puntali per applicazione da 17 gauge (30 pz.)
S622	Puntali per applicazione da 19 gauge (30 pz.)



Per maggiori informazioni o per ordini contattare
pmattiucci@parkell.com tel. +46 708 593 481 oppure
visitare il sito www.parkell.com.

parkell®